

SAVER™ EVO

Data Management Software
For samaritan® AED, PAD & PDU



samaritan® PAD, AED ve PDU
Saver™ EVO Kullanım Talimatları

Bu belgedeki bilgiler önceden haber verilmeden değiştirilebilir ve HeartSine Technologies Inc adına herhangi bir taahhüt içermez. Bu elkitabının hiçbir bölümü HeartSine Technologies Inc şirketinden açık yazılı izin alınmadan çoğaltılamaz ya da elektronik, mekanik herhangi bir şekilde hiçbir biçime aktarılamaz, bunlara herhangi bir amaç için fotokopi çekme ve kaydetme dahildir.

Telif Hakkı© 2008 HeartSine Technologies Inc.
Tüm hakları saklıdır.

“samaritan”, HeartSine Technologies Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır

“Saver” ve “SCOPE”, HeartSine Technologies Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır

Diğer tüm ticari markalar ve tescilli ticari markalar ilgili sahiplerinin mülküdür.

Saver™ EVO Aralık 2008

HeartSine Technologies Ltd.

Canberra House
203 Airport Road West
Belfast
BT3 9ED
Northern Ireland



Telefon: +44 28 9093 9400 • Faks: +44 28 9093 9401
Web sitesi: www.heartsine.com • E-posta: support@heartsine.com

Turkish
H013-001-035-0


Saver™ EVO KULLANIM TALİMATLARI

Saver™ EVO yazılımı samaritan® PAD, samaritan® AED Data-Pak™ bataryanızdan ve PDU Hafıza Kartından defibrilasyon durumlarını almanıza olanak sağlar. Saver™ EVO ayrıca olay verilerinin yazdırılması ve diğer Saver™ ve Saver™ EVO kullanıcılarına gönderilmesi ve bu kullanıcılardan alınması için PC'ye kaydedilen olay verilerinin yönetimine de olanak tanıyacaktır.

Saver™ EVO'nin tek bir PC'de kurulmasına ve kullanımına olanak sağlamak için bir yazılım lisansı verilmiştir.








Kurulum talimatları CD ROM'da verilmiştir ve güvenlik için kopyası alınmıştır.

Saver EVO Kurulum Talimatları

1. CD'yi kurulacak olan bilgisayardaki CD ROM'a yerleştirin.
2. CD kurulum programını otomatik olarak çalıştırmaya başlayacaktır. (Eğer bilgisayarınız kurulum programını otomatik olarak çalıştırmazsa, CD ROM'a gözetin ve  simgesine çift tıklayın).
3. Kullanıcı lisans anlaşmasını okuyun. Bu yazılımı kurmak için bu anlaşma şartlarını kabul etmeniz gereklidir. Şartları kabul etmek için "ileri" düğmesine tıklayın.
4. Saver™ EVO standart yapılandırma ile varsayılan yere kurulacaktır. "Kabul ediyorum" düğmesine tıklayarak kabul edin. Deneyimli bir bilgisayar kullanıcısı değilseniz bu varsayılan ayarlar değiştirilmemelidir.
5. Cihaz sürücü belgesini sorarsa "Devam et" düğmesine tıklayın.
6. Yazılım kurulumu şimdi tamamlanacak. Tamamlandığında CD'yi CD ROM sürücüsünden çıkarın ve saklayın.

HIZLI TALİMATLAR

Samaritan® PAD veya samaritan® AED Data-Pak™ bataryasından veya PDU Hafıza Kartından kaydedilen defibrilasyon durum verilerini almak içindir.

1. İlgili cihazı PC'ye bağlayın.
2. Saver™ EVO yazılımını açın.
3.  düğmesine veya  düğmesine veya  düğmesine tıklayın.
4.  düğmesine tıklayarak kaydedilen durumların listesini gösterin.
5. Listedeki gerekli kaydedilen verileri vurgulayın.
6.  düğmesine tıklayarak durumu inceleyin.
7.  düğmesine tıklayın ve durumu PC'ye kaydetmek için hasta bilgilerini gerektiği gibi girin.
8. Gerekirse,  düğmesine tıklayarak durum kaydını yazdırın.

Saver™ EVO KULLANIMI

Saver™ EVO kullanımı yazılımdaki sezgisel düğmeler ile yapılır. Saver™ EVO Ekranı burada gösterildiği gibi başlatın.



Saver™ EVO başlangıç ekranı



samaritan® PAD – PAD'a özel işlevler için menüyü açar. Ayrıntılar için 5. Sayfaya bakın.



samaritan® AED – AED'e özel işlevler için menüyü açar. Ayrıntılar için 11. Sayfaya bakın.



PDU – PDU'ya özel işlevler için menüyü açar. Ayrıntılar için 16. sayfaya bakın.



Kayıtlı olayları yönet – PC'ye kaydedilen durumlar için olan özel işlevlerin menüsünü açar. Ayrıntılar için 20. Sayfaya bakın.



Saver'dan Çık – Saver™ EVO yazılımından çıkar.



Saver™ EVO Ayarlarını Değiştir -- Saver™ EVO şifresini değiştirir ve dil seçeneklerini seçer. Ayrıca kullanıcının Saver™ EVO düzeltme bilgilerini görüntüler.

Yukarıdaki özel menülerin kullanımı ileriki bölümlerde daha ayrıntılı anlatılacaktır.

Saver™ EVO'nun samaritan® PAD İLE KULLANIMI

Saver™ EVO'yu samaritan® PAD ile kullanmak için PAD veya Saver™ EVO yazılımı ile birlikte verilen USB veri kablosuna sahip olmanız gereklidir.

USB veri kablosunu kullanarak bunu samaritan® PAD ve PC'nizdeki USB girişine bağlayın. Saver™ EVO yazılımını açın.



Samaritan PAD düğmesine tıkladığınızda aşağıda gösterilen pencere açılacaktır.



Saver™ EVO
PAD erişim ekranı



PAD Verisi - Bu düğmeye tıklayarak PAD'den durum verilerini alın. Ayrıntılar için 6. Sayfaya bakın.



PAD Ayarlarını Değiştir - Bu düğmeye tıklayarak tanılama testlerini yapın ya da samaritan® PAD'deki yapılandırmayı (ses, dil veya saat) değiştirin. Ayrıntılar için 8. sayfaya bakın.



Geri - Bu düğmeye tıklayarak Saver™ EVO başlangıç ekranına dönün.

samaritan® PAD'DEN DURUM VERİ BİLGİLERİNİN ALINMASI

samaritan® PAD'den defibrilasyon durum verilerini almak için samaritan® PAD'in PC'nize bağlı



olduğundan emin olun ve ardından PAD Veri düğmesine tıklayın. Bu PAD hafızasını arayacak ve kayıtlı tüm durumları listeleyecek ve gösterildiği gibi ekrana getirecektir.



Saver™ EVO
PAD durum kayıt
listesi ekranı

✓ işareti ile birlikte yeşil metinde gösterilen durumlar daha önceden PC'ye kaydedilen durumlardır.



Tümünü Kaydet - Tümünü Kaydet düğmesine tıkladığınızda PAD durum kaydında listelenen tüm durumların PC'de tek bir dosyaya kaydedilmesine sebep olacaktır.

Not: Bu yöntem kullanılarak kaydedilen durumlar Saver™ EVO'nun bu sürümü ile görüntülenmesi için alınamaz. Durumları bu dosyadan almak için HeartSine Technologies müşteri desteği ile temasa geçiniz.



Görüntüle – Bu düğmeye tıkladığınızda seçilen durumun gösterilmesine sebep olacaktır.



Sil – Bu düğmeye tıkladığınızda tüm durumları PAD durum kaydından silecektir. Verilerin silinmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için sayfa 8'e bakınız.




Geri - Bu düğmeye tıklayarak Saver™ EVO PED erişim ekranına dönün.

samaritan® PAD'İNDE DURUMLARIN İNCELENMESİ



Bir durumu incelemek için durumu listede vurgulayın ve ardından Görüntüle düğmesine tıklayın. Bu, defibrilasyon durumunu ECG işareti ile birlikte gösterecek ve durum kaydını tek bir görüntü penceresinde gösterecektir.

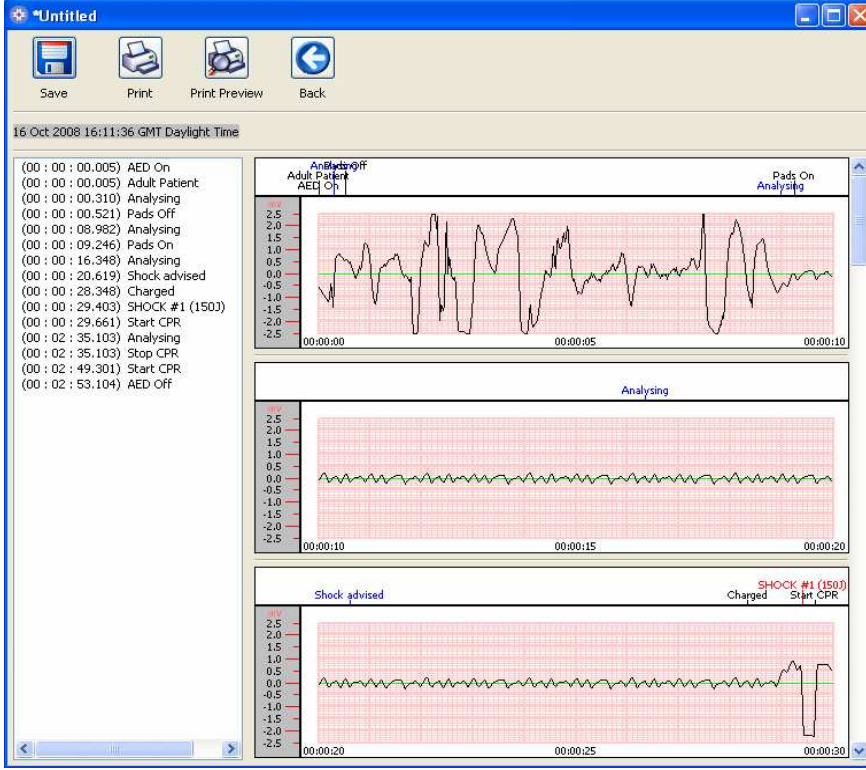

Saver™ EVO
PAD durum inceleme
penceresi



Artık Kaydet düğmesine tıklayarak gösterilen durumu PC'ye kaydetmeyi seçebilirsiniz. Bu şekilde kaydedilen durumlar Saver™ EVO'da alınabilir ve görüntülenebilir. Hastayı PC'deki kayıtlı durumlar listesinde tanımlayabilmek üzere bilgi girmek için seçenekler sunar. Hasta hakkındaki bilgiler alfa nümerik karakterlerden oluşabilir ve her alan gerekirse tamamlanabilir ya da boş bırakılabilir.

Enter Patient Details

Example0003

Record Type: Example

Surname:

Forname:

D.O.B.:

Patient ID:

Event Date and Time: 29 Sep 2006 14:09:30

New Record Type Save Cancel

Saver™ EVO
PAD Hasta bilgileri penceresi

Not: Defibrilasyon durum verileri PC'nize kaydedildiğinde bu bilgiler değiştirilemez.

Saver™ EVO durum görüntüleme penceresi ayrıca şu düğmelere sahiptir:



Durumu Yazdır – Bu düğmeye tıklayarak şu anda inceleme penceresinde gösterilen durumu yazdırın.



Önizlemeyi Yazdır – Bu düğmeye tıkladığınızda yazdırılan verilerin önizlemesi ekranda gösterilecektir.



Geri - Bu düğmeye tıklayarak Saver™ EVO PED durum kayıt listesi ekranına dönün.

samaritan® PAD'İNDEKİ HAFIZANIN SİLİNMESİ



samaritan® PAD hafızasını silmek için Sil düğmesine tıklayın

Saver™ EVO hafıza silinmeden önce uyarı vererek Parola girmenizi isteyecektir. Doğru parola girildiğinde, samaritan® PAD hafızası silinecektir.

İkaz: HeartSine silmeden önce PAD hafızasını tam olarak indirmenizi önerir. Bu bilgi ileride başvurulmak üzere güvenilir bir yerde saklanmalıdır.

Durum verileri samaritan® PAD'den alındığında ve PC'ye kaydedildiğinde durumların PAD hafızasından silinmesi önerilir. Bu şekilde verileri diğer defibrilasyon durumunda kaydetmek için tam hafızanın hazır bulunduğundan emin olabilirsiniz.

samaritan® PAD AYARLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ



PAD ayarlarının değiştirilmesi düğmesi kullanıcının bazı samaritan® PAD özelliklerini şu şekilde yapılandırmasına olanak sağlar;

- Saati Ayarla/Kontrol et
- Tanılama testlerini çalıştır

Ek olarak ilgili yetkiye sahip kullanıcılar şunları değiştirebilir;

- Ses
- Dil
- Metronom ses etkin/engelli




düğmesine tıkladığınızda PAD ayarlarını değiştir düğmesi şu ekrana erişim sağlayacaktır (sonraki sayfaya bakınız):



Saver™ EVO
PAD Ayarlarını değiştir penceresi



PAD saatini ayarla/kontrol et – Bu düğme kullanıcıların samaritan® PAD'deki saati PC'lerindeki saat ile eşzamanlamalarına olanak sağlar.

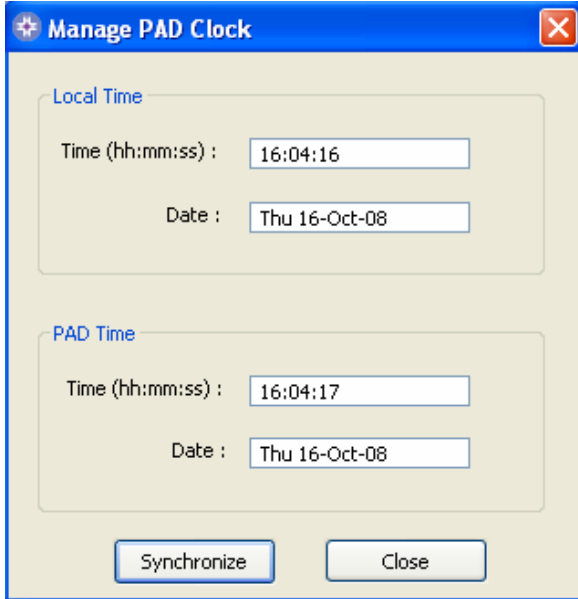

Saver™ EVO
PAD Saatini Ayarla/Kontrol et penceresi

Eşzamanla düğmesine tıkladığınızda saati samaritan® PAD üzerinde ayarlayarak bağlı olduğu PC ile aynı saate getirecektir.

Kapat düğmesine tıkladığınızda Saver™ EVO PAD Ayarlarını değiştir penceresine dönersiniz.




Tanılama Testlerini Çalıştır – Bu düğme kullanıcının bazı temel testleri çalıştırmasına olanak sağlayarak samaritan® PAD'in doğru çalıştığını kontrol eder. Mevcut tanılama testleri listesine aşağıda gösterilen şu düğme ile açılan penceredeki “indirmeli” menüden ulaşılabilir.



Saver™ EVO
PAD Tanılama testleri penceresi



PAD Yapılandırmasını Düzenle – Bu düğme kullanıcıların sesi, dili, değiştirmelerine ve metronom sesini engellemelerine veya etkinleştirmelerine olanak sağlar. Bu değişiklikler yalnızca istendiğinde gerekli parolayı girerek yapılandırılabilir. Aşağıdaki ekran bu seçenekler gösterilmektedir. Dil seçimleri cihazda programlanan dillerle sınırlıdır ve indirmeli menü ile erişim sağlanmaktadır. Bu ekranda ayrıca PAD'in yazılım sürümü de gösterilmektedir.

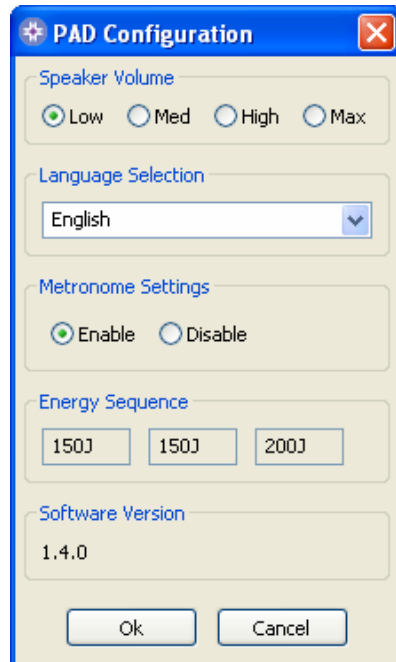

Saver™ EVO
PAD Yapılandırmasını düzenle penceresi

Saver™ EVO'nun samaritan® AED Data-Pak™ BATARYASI İLE KULLANIMI

Saver™ EVO'yu samaritan® AED Data-Pak™ bataryası ile birlikte kullanmak için Samaritan Veri Kurtarma Ünitesinin (SDRU) USB sürümüne ve kabloya sahip olmanız gereklidir. Bilgisayarın paralel girişine bağlanan SDRU ünitesinin eski sürümleri Saver™ EVO ile çalışacaktır. SDRU'yu veri kablosunu kullanarak PC'ye bağlayın ve Saver™ EVO yazılımını açın.



Samaritan AED düğmesine tıklayın. Bu, aşağıdaki alt menü penceresini açacaktır.



Saver™ EVO
AED erişim ekranı



AED Verisi - Bu düğmeye tıklayarak AED Data-Pak™'den durum verilerini alın. Ayrıntılar için 12. Sayfaya bakın.



AED Ayarlarını Değiştir - Bu düğmeye tıklayarak yapılandırma ayarlarını inceleyin ve değiştirin ya da samaritan® AED Data-Pak™'deki saat ile eşzamanlayın. Ayrıntılar için 14. sayfaya bakın.



Geri - Bu düğmeye tıklayarak Saver™ EVO başlangıç ekranına dönün.


samaritan® Data-Pak™ BATARYASINDAN DURUM VERİLERİNİN ALINMASI



Data-Pak™ bataryasını SDRU'ya yerleştirin ve AED Veri düğmesine tıklayın. Bu, Data-Pak bataryasına kaydedilen durumları listeleyecektir.



Saver™ EVO
AED durum kayıt listesi ekranı

 saat işareti bulunan durumlar başarıyla geçen AED otomatik testleridir.



Tümünü Kaydet – Bu düğme AED modunda engellidir.



Görüntüle – Bu düğmeye tıkladığınızda seçilen durumun gösterilmesine sebep olacaktır. Ayrıntılar için 13. sayfaya bakın.



Sil – Bu düğme yalnızca SDRU'daki batarya yeniden şarj edilebilir Data-Pak+™ ise etkindir. Aksi halde engellidir. Ayrıntılar için 14. sayfaya bakın.




Geri - Bu düğmeye tıklayarak Saver™ EVO PED erişim ekranına dönün.

samaritan® AED'DE KAYITLI DURUMLARIN İNCELENMESİ



Bir durumu incelemek için durumu listede vurgulayın ve ardından Görüntüle düğmesine tıklayın.

Bu, defibrilasyon durumunu ECG işareti ile birlikte gösterecek ve durum kaydını tek bir görüntü penceresinde gösterecektir:

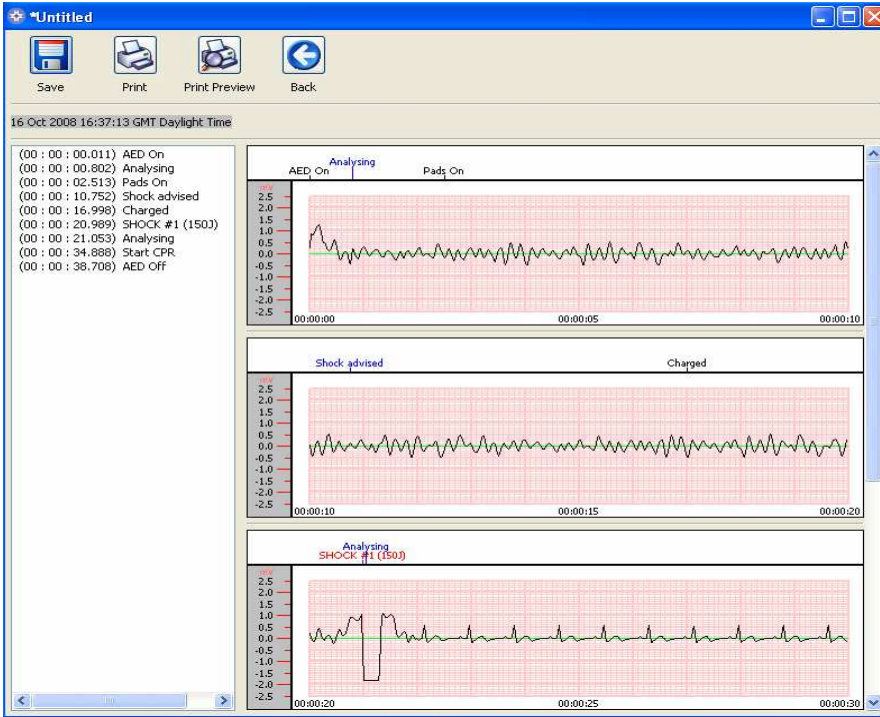

Saver™ EVO
AED durum inceleme
penceresi



Kullanıcı artık Kaydet düğmesine tıklayarak gösterilen durumu PC'ye kaydetmeyi seçebilir. Bu, hastayı tanıyabilmek için bilgi girilmesine olanak sağlayan seçenekler sunar. Hasta hakkındaki bilgiler alfa nümerik karakterlerden oluşabilir ve her alan gerekirse tamamlanabilir ya da boş bırakılabilir.

Saver™ EVO
AED Hasta bilgileri penceresi

Not: Defibrilasyon durum verileri PC'nize kaydedildiğinde bu bilgiler değiştirilemez.

Saver™ EVO durum görüntüleme penceresi ayrıca şu düğmelere sahiptir:



Durumu Yazdır – Bu düğmeye tıklayarak şu anda inceleme penceresinde gösterilen durumu yazdırın.



Önizlemeyi Yazdır – Bu düğmeye tıkladığınızda yazdırılan verilerin önizlemesi ekranda gösterilecektir.



Geri - Bu düğmeye tıklayarak Saver™ EVO PED durum kayıt listesi ekranına dönün.

Data-Pak™+ HAFIZASININ SİLİNMESİ



Data-Pak™+ hafızasını silmek için Sil düğmesine tıklayın. Saver™ EVO hafıza silinmeden önce uyarı vererek Parola girmenizi isteyecektir. Doğru parola girildiğinde, samaritan® PAD hafızası silinecektir.

İkaz: HeartSine silmeden önce Data-Pak hafızasındaki tüm durumları indirmenizi önerir. Bu bilgi ileride başvurulmak üzere güvenilir bir yerde saklanmalıdır.

Durum verileri samaritan® AED Data-Pak™+ bataryasından alındığında ve PC'ye kaydedildiğinde durumların batarya hafızasından silinmesi önerilir. Bu şekilde verileri diğer defibrilasyon durumunda kaydetmek için tam hafızanın hazır bulunduğundan emin olabilirsiniz.

AED ayarlarını DEĞİŞTİR.




düğmesine tıkladığınızda AED ayarlarını değiştir düğmesi şu ekrana erişim sağlayacaktır (sonraki sayfaya bakınız):



Saver™ EVO
AED Ayarlarını değiştir penceresi



AED saatini ayarla/kontrol et – Kullanıcıların samaritan® AED Data-Pak bataryasındaki saati PC'lerindeki saat ile eşzamanlamalarına olanak sağlar.

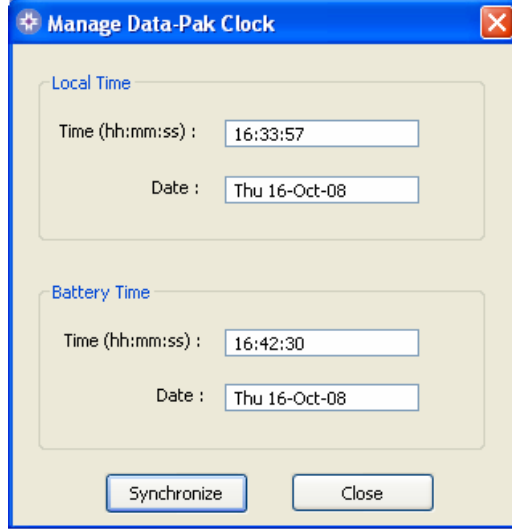


Saver™ EVO
AED Saatini Ayarla/Kontrol et penceresi

Eşzamanla düğmesine tıkladığınızda saati samaritan® AED Data-Pak bataryası üzerinde ayarlayarak bağlı olduğu PC ile aynı saate getirecektir.



AED yapılandırmasını düzenle – Bu düğme kullanıcıların sesi, değiştirmesine, ses kaydını etkinleştirmesine veya engellemesine, ışığın açık kaldığı sürenin uzunluğunu değiştirmesine, Başlangıçta otomatik testi etkinleştirmesine veya engellemesine ve metronom sesini etkinleştirmesine veya engellemesine olanak sağlar. Bu değişiklikler yalnızca istendiğinde gerekli parolayı girerek yapılandırılabilir. Aşağıdaki ekran bu seçenekler gösterilmektedir. Data-Pak bataryasının kapasitesi de bu ekranda gösterilmiştir. Eğer Data-Pak™ bataryası kullanılmışsa, bu durumda bu ekran batarya kapasitesini göstermeyecektir.

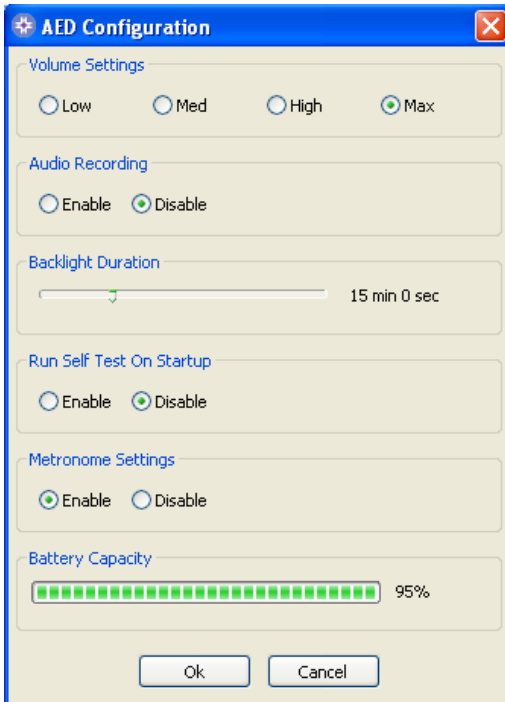

Saver™ EVO
PAD Yapılandırmasını düzenle penceresi

Saver™ EVO'nun samaritan® PDU İLE KULLANIMI

Saver™ EVO'yu samaritan® PDU hafıza kartı ile birlikte kullanmak için kartı Saver™ EVO çalışan PC'ye bağlı ya da bütünleşik olan MMC/SD uyumlu kart okuyucusuna yerleştirmeniz gereklidir. Bilgisayarınızın işletim sistemini algılayarak kart okuyucusunda bir kart olduğunu algılaması için bu işlemin birkaç saniye sürebileceğini, hatta bir dakikadan uzun sürebileceğini lütfen aklınızda bulundurun.



PDU düğmesine tıklayın. Bu, aşağıdaki alt menü penceresini açacaktır.



PDU Verisi - Bu düğmeye tıklayarak PAD Hafıza kartının durum verilerini alın. Ayrıntılar için 17. sayfaya bakın.




PDU Ayarları - Bu düğmeye tıklayarak samaritan® PDU Data-Pak™ yapılandırma ayarlarını inceleyin. Ayrıntılar için 19. sayfaya bakın.





Geri - Bu düğmeye tıklayarak Saver™ EVO başlangıç ekranına dönün.

samaritan® Data-Pak™ HAFIZA KARTINDAN DURUM VERİLERİNİN ALINMASI

samaritan® PDU hafıza kartının SD/MMC kart okuyucusuna takıldığından emin olun ve  PDU Veri düğmesine tıklayın. Bu, Hafıza kartına kaydedilen durumları listeleyecektir.



Saver™ EVO
PDU durum kayıt listesi ekranı

-  saat işareti bulunan durumlar başarıyla geçen PDU otomatik testleridir.
-  işareti ile birlikte yeşil metinde gösterilen durumlar daha önceden PC'ye kaydedilen durumlardır.



Tümünü Kaydet – Bu düğme PDU modunda engellidir.



Görüntüle – Bu düğmeye tıkladığınızda seçilen durumun gösterilmesine sebep olacaktır. Ayrıntılar için 18. sayfaya bakın.



Sil – Bu düğme PDU Modunda engellenir.




Geri - Bu düğmeye tıklayarak Saver™ EVO PDU erişim ekranına dönün.

samaritan® PDU'DE KAYITLI DURUMLARIN İNCELENMESİ



Bir durumu incelemek için durumu listede vurgulayın ve ardından Görüntüle düğmesine tıklayın.

Bu, defibrilasyon durumunu ECG işareti ile birlikte gösterecek ve durum kaydını tek bir görüntü penceresinde gösterecektir:

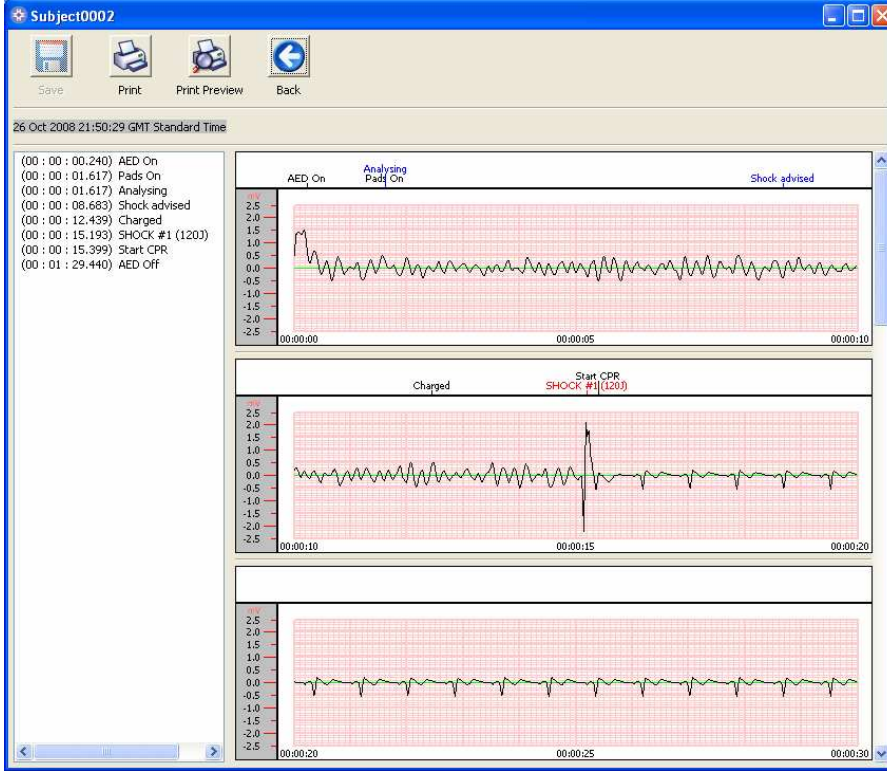

Saver™ EVO
PDU durum
inceleme penceresi



Kullanıcı artık Kaydet düğmesine tıklayarak gösterilen durumu PC'ye kaydetmeyi seçebilir. Bu, hastayı tanıyabilmek için bilgi girilmesine olanak sağlayan seçenekler sunar. Hasta hakkındaki bilgiler alfa nümerik karakterlerden oluşabilir ve her alan gerekirse tamamlanabilir ya da boş bırakılabilir.

Saver™ EVO
PDU Hasta bilgileri penceresi

Not: Defibrilasyon durum verileri PC'nize kaydedildiğinde bu bilgiler değiştirilemez.

Saver™ EVO durum görüntüleme penceresi ayrıca şu düğmelere sahiptir:



Durumu Yazdır – Bu düğmeye tıklayarak şu anda inceleme penceresinde gösterilen durumu yazdırın.



Önizlemeyi Yazdır – Bu düğmeye tıkladığınızda yazdırılan verilerin önizlemesi ekranda gösterilecektir.



Geri - Bu düğmeye tıklayarak Saver™ EVO PED durum kayıt listesi ekranına dönün.

PDU AYARLARINI GÖRÜNTÜLEYİN.




Ayarları Görüntüle düğmesine tıklayarak şu PDU Yapılandırma ekranına erişim sağlayın. Bu ekran kullanıcının batarya gücünü, hoparlör sesini, dili ve metronom ayarlarını, CPR hızını ve süresini ve son kullanma tarihini, yazılım sürümünü ve PDU cihazının seri numarasını görmesine olanak sağlar. Kullanıcı bu ayarları görüntüleyebilir ve herhangi bir değişiklik yapmayabilir.




Saver™ EVO
PDU Ayarlarını görüntüle penceresi

Saver™ EVO'NUN KAYITLI DURUMLAR İLE GÖRÜNTÜLENMESİ

Saver™ EVO'nun ana ekranındaki kayıtlı durumları yönet düğmesi  bilgisayara kaydedilen samaritan® PAD, samaritan® Data-Pak bataryasından veya PDU Hafıza Kartından indirilen durum verilerini kullanıcıların incelemesine olanak sağlar.

Bu düğmeye tıkladığınızda aşağıdaki gibi bir pencere açacaktır;



Listedeki bir durumun vurgulanması ve  Görüntüleye tıklanması kayıtlı durumu açarak ECG verilerini ve durum kaydını incelemenizi sağlayacaktır.

Veri alma ve verme

Saver™ EVO'da kullanıcının defibrilasyon durum verilerini Saver™ EVO yazılımına sahip olan diğer kullanıcılara gönderme ve onlardan veri alma özelliği vardır. Kayıtlı durumların kopyalarını göndermek veya almak için Saver™ EVO'nun Veri Al ve Gönder özellikleri kullanılır.

Durumları Göndermek için.

1. Kayıtlı durumları yönet ekranından göndermek istediğiniz durumu veya durum sayılarını

vurgulayın ve ardından  düğmesine tıklayın.

2. PC, göndereceğiniz dosyayı bilgisayarda nereye kaydedeceğinizi soracaktır ve ayrıca gönderilen dosyaya bir ad vermenize de olanak sağlar.
3. Kaydet düğmesine tıklayarak dosyayı seçtiğiniz yere kaydedin.

Bunun ardından çıkarılan bu dosyayı Saver™ EVO yazılımına sahip diğer kullanıcıya normal eposta yazılımı kullanarak eposta ile göndermek mümkündür.

Saver™ EVO'nun durum verisi yalnızca başka bir Saver™ EVO kullanıcısı tarafından görüntülenebilir. Önceki Saver™ yazılımı verileri Saver™ EVO'dan başarılı bir şekilde alamayacak ve gösteremeyecektir

Durumları almak için

Durumları almak ve bunları PC'nizde görüntülemek için diğer Saver™ veya Saver™ EVO kullanıcısının gönderdiği dosya PC'nizdeki bir yere kaydedilmelidir.



1. Saver™ EVO Kayıtlı Durumları Yönet ekranından düğmesine tıklayın.
2. Dosyanın kaydedildiği yere gözetin ve aç'a tıklayın.
3. Kayıtlar bilgisayarınızdaki Saver™ EVO dosyaları listesine eklenecektir.

Bunlar daha sonra listedeki durum vurgulanarak ve Görüntüle düğmesine tıklanarak görüntülenebilir.

Saver™ EVO, yazılımın Saver™ adındaki önceki sürümlerinden gönderilen durum verilerini doğru bir şekilde alabilecek ve gösterebilecektir.

Kayıtlı durumları silmek için

Kayıtlı durumlar bilgisayar hafızanızdan Saver™ EVO kullanarak silinebilir. İlgili durum vurgulanarak silinecek olan durum(lar) seçilerek durumlar tek tek silinir (birden fazla durum da seçilebilir).

Yalnızca silmek istediğiniz durumları seçerek onayladığınızda



Sil düğmesine tıklayın. Saver™ EVO hafıza silinmeden önce uyarı vererek Parola girmenizi isteyecektir. Doğru parola girildiğinde, seçilen olayların hafızası bilgisayarınızdan silinecektir.

İkaz: Lütfen silmeden önce yalnızca silmek istediğiniz durumların seçili olduğundan emin olun. Bilgisayarınızdan silindiğinde hafıza durumları yeniden oluşturulamaz ve tüm bilgiler kaybedilir.


PAROLANIN VE DİLİN Saver™ EVO'DA DEĞİŞTİRİLMESİ

Saver™ EVO yalnızca bir parola girilerek değiştirilebilen ya da tamamlanabilen bazı özelliklere sahiptir. Bu durum yazılım yöneticilerinin yetkili kullanıcılara belirli kapasitelere erişimlerini sınırlandırmasına olanak sağlamaktadır. Saver™ EVO gönderilirken parola varsayılan "parola"ya ayarlı olarak gönderilir.

Bu parolayı istediğiniz bir parolaya değiştirmek için şunları yapmanız gereklidir;



Bu ana Saver™ EVO ekranında küçük  düğmeye tıklayın. Bu şu pencereyi açacaktır.

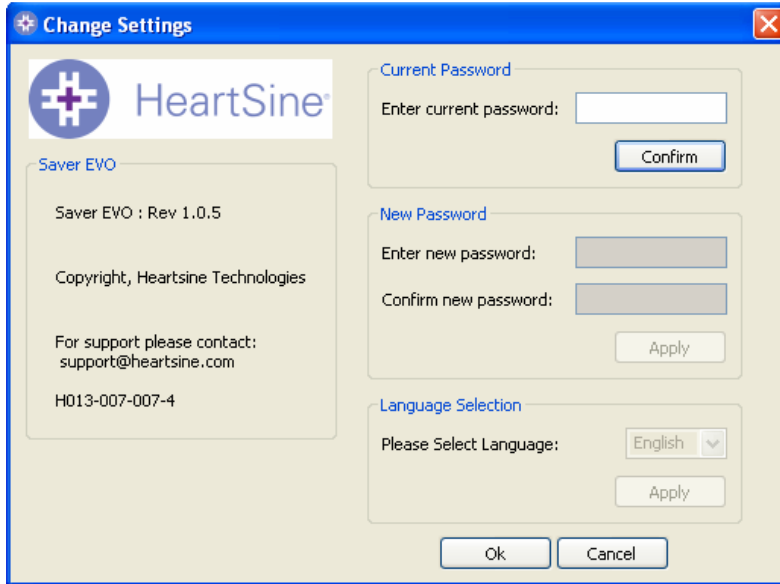

Mevcut parolayı girin ve "Onayla"ya tıklayın. Bu, yeni parolayı girmenize ve onaylamanıza olanak sağlayacaktır. "Uygula"ya tıklayarak değişiklik yapın. Parolanın başarılı bir şekilde değiştirildiğini gösteren bir onay görünecektir. Burada Tamam'a tıklayın ve Parola değiştir penceresinde tekrar "Tamam"a tıklayarak bu işlemden çıkın.


Saver™ EVO'yu yeniden kurduğunuzda parolayı yazılımda varsayılan parolaya değiştireceğini aklınızda bulundurun. Ancak bu işlem daha önceden kaydedilen herhangi bir durum verisini silmeyecektir.

Dil seçimi

Saver™ EVO yazılımının dilini seçmek için indirmeli listeden dili seçin ve uygulaya tıklayın.



Uygulaya tıkladığınızda aşağıdaki ekran belirecek ve yapılan dil değişikliğini uygulanması için Saver™ EVO'nun yeniden başlatılması gerekecektir.

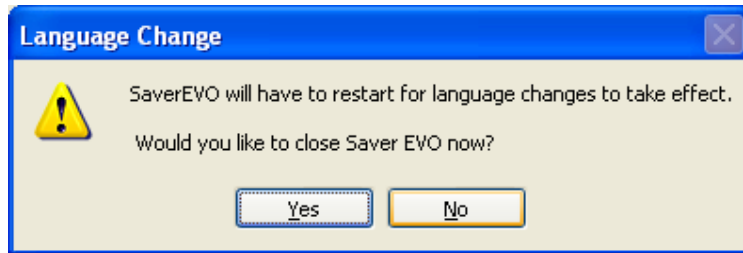

Evet'e tıkladığınızda parola değişmemişse aşağıdaki bilgi kutusu görünecektir.



Parolayı değiştirmek isteyip istemediğinize bağlı olarak Evet veya Hayır'ı seçin.

Saver™ EVO Kullanım Talimatları

Not: Dili deęiřtirmek iin gerekli olan prosedürün bir parası olarak parola deęiřtirilmiřse, bu bilgi kutusu görünmeyecektir.

Saver™ EVO kapanacak ve yeniden bařlatıldıęında seilen yeni dil ile alıřacaktır.