

SAVER™ EVO

Data Management Software
For samaritan® AED, PAD & PDU



samaritan® AED, PAD & PDU
Guide d'utilisation du logiciel Saver™ EVO

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis et n'engagent en rien la responsabilité de HeartSine Technologies. Aucune section de ce guide ne peut faire l'objet de reproduction totale ou partielle ou transmission sous quelque forme que ce soit, de manière électronique ou mécanique, y compris par photocopie ou enregistrement à des fins quelconques, sans l'autorisation expresse écrite de HeartSine Technologies.

Copyright© 2008 HeartSine Technologies. Tous droits réservés.

« samaritan » est une marque déposée de HeartSine Technologies.

« Saver » et « SCOPE » sont des marques commerciales de HeartSine Technologies.

Toutes les autres marques commerciales et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Saver™ EVO Décembre 2008

HeartSine Technologies Ltd.

Canberra House
203 Airport Road West
Belfast
BT3 9ED
Irlande du Nord



Téléphone : +44 28 9093 9400 • Fax : +44 28 9093 9401
Site web : www.heartsine.com • E-mail : support@heartsine.com

French
H013-001-028-2


MODE D'EMPLOI DU LOGICIEL Saver™ EVO

Le logiciel Saver™ EVO permet de récupérer les données des événements de défibrillation du samaritan® PAD, ainsi que de la batterie du samaritan® AED Data-Pack™ et de la carte-mémoire du PDU. Le logiciel Saver™ EVO permet également de gérer les données qui ont été sauvegardées sur votre PC pour les imprimer ou encore les importer et les exporter sur d'autres logiciels Saver™ et Saver™ EVO.

Le logiciel Saver™ EVO est fourni avec une licence permettant l'installation et l'usage de ce dernier sur un PC unique.








Les instructions d'installation sont fournies avec le CD ROM et sont dupliquées ici par souci de commodité.

Instructions d'installation du logiciel Saver EVO

1. Insérez le CD dans le lecteur de CD ROM de l'ordinateur sur lequel vous souhaitez l'installer.
2. Le CD exécutera automatiquement le programme d'installation. (Si votre ordinateur n'exécute pas automatiquement le programme d'installation, naviguez jusqu'à l'emplacement du CD ROM et double-cliquez sur cet icône : ).
3. Veuillez lire la licence d'utilisation. Pour installer ce logiciel, vous devez accepter les termes et conditions de la licence. Pour les accepter, cliquez sur le bouton « suivant ».
4. Le logiciel Saver™ EVO sera automatiquement installé dans son mode de configuration standard dans le répertoire par défaut. Cliquez sur « J'accepte » pour continuer. Les réglages par défaut ne doivent pas être modifiés à moins que vous ne soyez un utilisateur expérimenté.
5. Si une certification pilote vous est demandée, cliquez sur le bouton « Continuer ».
6. L'installation du logiciel est maintenant terminée. Retirez le CD du lecteur et rangez-le.

INSTRUCTIONS RAPIDES

Pour récupérer les données des événements de défibrillation enregistrées sur le samaritan® PAD, sur la batterie du samaritan AED Data-Pack™ ou encore sur la carte-mémoire du PDU :

1. Connectez l'appareil en question au PC.
2. Lancez le logiciel Saver™ EVO.
3. Cliquez sur le bouton , sur le bouton  ou sur le bouton .
4. Cliquez sur le bouton  pour afficher la liste des événements enregistrés.
5. Sélectionnez l'évènement voulu parmi ceux de la liste.
6. Cliquez sur le bouton  pour visualiser l'évènement.
7. Cliquez sur le bouton  et entrez les informations relatives au patient comme indiqué pour sauvegarder l'évènement sur le PC.
8. Si nécessaire, cliquez sur le bouton  pour imprimer l'enregistrement relatif à l'évènement.

UTILISATION DU LOGICIEL Saver™ EVO

L'utilisation du logiciel Saver™ EVO est très simple grâce à ses boutons intuitifs. L'écran de démarrage du logiciel Saver™ EVO ci-dessous apparaîtra :



Ecran de démarrage sur Saver™ EVO



samaritan PAD – Pour ouvrir le menu des fonctions spécifiques au PAD. Pour plus de détails, voir page 5.



samaritan DEA – Pour ouvrir le menu des fonctions spécifiques au DEA. Pour plus de détails, voir page 11.



PDU – Pour ouvrir le menu des fonctions spécifiques au PDU. Pour plus de détails, voir page 16.



Gérer les événements enregistrés – Pour ouvrir le menu des fonctions spécifiques aux événements enregistrés sur le PC. Pour plus de détails, voir page 20.



Quitter le logiciel – Pour quitter le logiciel Saver™ EVO.



Modifier les paramètres du logiciel – Pour changer le mot de passe ou la langue du logiciel Saver™ EVO. Permet de visualiser les informations relatives à la révision du logiciel Saver™ EVO.

L'utilisation des menus spécifiques mentionnés ci-dessus sera plus détaillée dans les sections suivantes.

UTILISATION DU LOGICIEL Saver™ EVO AVEC LE samaritan® PAD

Pour utiliser le logiciel Saver™ EVO avec le samaritan® PAD, vous aurez besoin du câble USB fourni avec le PAD ou le logiciel Saver™ EVO.

Connectez le câble USB au samaritan® PAD et au port USB de votre PC. Lancez le logiciel Saver™ EVO.

Cliquez sur le bouton 'samaritan PAD'  pour accéder à l'écran ci-dessous :



Ecran d'accès au PAD
sur Saver™ EVO



Données du PAD – Pour récupérer les données des événements de défibrillation du PAD. Pour plus de détails, voir page 6.



Modifier les paramètres du PAD – Pour exécuter des tests de diagnostic ou modifier la configuration (volume, langue ou heure) du samaritan® PAD. Pour plus de détails, voir page 8.



Retour – Pour revenir à l'écran de démarrage du logiciel Saver™ EVO.

RECUPERATION DES DONNEES DES EVENEMENTS DE DEFIBRILLATION DU samaritan® PAD

Pour récupérer les données des événements de défibrillation du samaritan® PAD, assurez-vous que



votre samaritan® PAD est bien connecté au PC, puis cliquez sur le bouton 'Données du PAD'. Cela permettra de consulter la mémoire du PAD et de lister tous les événements enregistrés tout en les affichant comme ci-dessous :



Ecran des
événements du PAD
sur Saver™ EVO

Les événements indiqués en vert et précédés du symbole ✓ sont les événements déjà enregistrés sur le PC.



Tout enregistrer – Pour enregistrer sur le PC tous les événements listés sur le PAD dans un fichier unique.

N.B. Les événements enregistrés de cette façon ne peuvent pas être récupérés et visualisés avec cette version du logiciel Saver™ EVO. Pour récupérer les événements de ce fichier, contactez le service d'assistance à la clientèle de HeartSine Technologies.



Afficher – Pour visualiser l'événement sélectionné.



Supprimer / Effacer – Pour supprimer tous les événements listés sur le PAD. Pour plus de détails, voir page 8.



Retour – Pour revenir à l'écran d'accès au PAD du logiciel Saver™ EVO.


VISUALISATION DES EVENEMENTS DE DEFIBRILLATION DU samaritan® PAD

Pour visualiser un évènement, sélectionnez l'évènement voulu parmi ceux de la liste puis cliquez sur



le bouton 'Afficher'.

L'évènement de défibrillation avec tracé ECG et la liste des évènements s'afficheront sur le même écran.

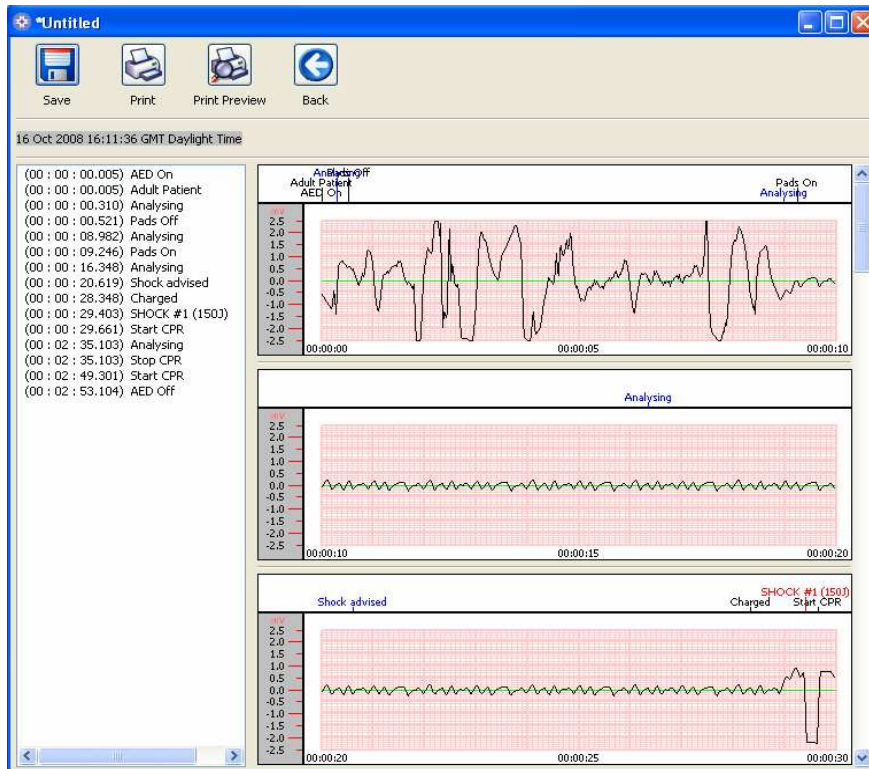

Ecran d'affichage des évènements du PAD sur Saver™ EVO

Vous pouvez maintenant choisir d'enregistrer l'évènement affiché sur le PC en cliquant sur le bouton



'Enregistrer'. Les évènements enregistrés de cette façon peuvent être récupérés et visualisés avec le logiciel Saver™ EVO. A ce stade vous pourrez entrer des informations sur le patient pour pouvoir l'identifier sur la liste des évènements sauvegardés. Les informations relatives au patient peuvent être composées de caractères alpha numériques, et chaque champ peut être complété ou laissé vierge si nécessaire.

Ecran des informations patient sur Saver™ EVO

N.B. Une fois les données de l'évènement de défibrillation enregistrées sur votre PC, elles ne pourront pas être modifiées.

L'écran d'affichage des évènements du logiciel Saver™ EVO contient également les boutons suivants :



Imprimer évènement – Pour imprimer l'évènement en cours de visualisation sur l'écran d'affichage.



Aperçu avant impression – Pour obtenir un aperçu des données à imprimer affichées à l'écran.



Retour – Pour revenir à l'écran des évènements du logiciel Saver™ EVO.

EFFACEMENT DE LA MEMOIRE DU samaritan® PAD



Pour effacer la mémoire du samaritan® PAD, cliquez sur le bouton 'Supprimer / Effacer'.

Par précaution, le logiciel Saver™ EVO vous demandera votre mot de passe avant l'effacement de la mémoire. Une fois le mot de passe correct entré, la mémoire du samaritan® PAD sera effacée.

Attention : HeartSine recommande de sauvegarder l'ensemble de la mémoire sur votre ordinateur avant de l'effacer. Ces informations devraient être stockées en toute sécurité pour référence future.

Il est recommandé d'effacer les évènements de la mémoire du PAD dont les données ont été récupérées depuis le samaritan® PAD et sauvegardées sur le PC. Cela permet de garantir que la mémoire soit entièrement disponible pour enregistrer les données d'un autre évènement de défibrillation.

MODIFICATION DES PARAMETRES DU samaritan® PAD



Le bouton 'Modifier les paramètres du PAD' permet de configurer certaines fonctions du samaritan® PAD comme suit :

- Vérifier / Régler l'heure
- Exécuter des tests de diagnostic

D'autre part, les utilisateurs bénéficiant des autorisations nécessaires peuvent également modifier :

- Volume
- Langue
- Activer / Désactiver le son du métronome




Cliquez sur le bouton 'Modifier les paramètres du PAD' pour accéder à l'écran suivant (voir page suivante) :



Ecran de modification des paramètres du PAD sur Saver™ EVO



Vérifier / Régler l'heure du PAD – Pour synchroniser l'heure du samaritan® PAD à celle de votre PC.

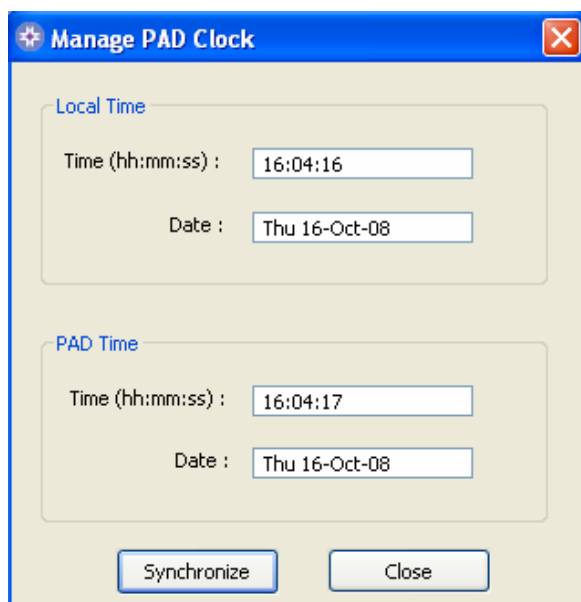

Ecran de vérification / réglage de l'heure du PAD sur Saver™ EVO

Cliquez sur le bouton 'Synchroniser' pour mettre le samaritan® PAD à l'heure du PC auquel il est connecté.

Cliquez sur le bouton 'Fermer' pour revenir à l'écran de modification des paramètres du PAD du logiciel Saver™ EVO.




Exécuter des tests de diagnostic – Pour exécuter des tests simples servant à vérifier que le samaritan® PAD fonctionne correctement. La liste des tests de diagnostic disponibles est accessible à partir du menu déroulant de l'écran s'ouvrant à partir de ce bouton ci-dessous :



Ecran des tests de diagnostic du PAD sur Saver™ EVO



Modifier la configuration du PAD – Pour modifier le volume, la langue, activer ou désactiver le son du métronome. Ces changements ne peuvent être confirmés que par la validation du mot de passe lorsqu'il est requis. L'écran ci-dessous illustre ces options. Le choix de la langue est limité à celles programmées dans l'appareil accessibles à partir d'un menu déroulant. Cet écran montre la version logicielle du PAD.

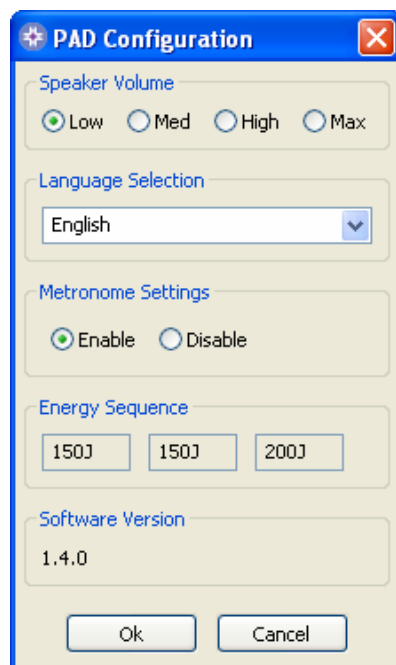

Ecran de configuration du PAD sur Saver™ EVO

UTILISATION DU LOGICIEL Saver™ EVO AVEC LA PILE DU samaritan® AED Data-Pak™

Pour utiliser le logiciel Saver™ EVO avec la batterie du samaritan® AED Data-Pak™, vous aurez besoin de la version USB de l'unité de récupération des données du samaritan (*samaritan Data Recovery Unit, SDRU*) et du câble fourni. Les anciennes versions de l'unité de récupération des données du samaritan qui se connectent à un port parallèle de l'ordinateur fonctionnent également avec le logiciel Saver™ EVO.

Connectez l'unité de récupération des données du samaritan au PC à l'aide du câble de données et lancez le logiciel Saver™ EVO.



Cliquez sur le bouton 'samaritan DEA'. Le sous-menu ci-dessous s'affichera à l'écran :



Ecran d'accès au DEA
sur Saver™ EVO



Données du DEA – Pour récupérer les données de défibrillation du samaritan® AED Data-Pak™. Pour plus de détails, voir page 12.



Modifier les paramètres du DEA – Pour visualiser et modifier les paramètres de configuration ou synchroniser l'heure du samaritan® AED Data-Pak™. Pour plus de détails, voir page 14.



Retour – Pour revenir à l'écran de démarrage du logiciel Saver™ EVO.

RECUPERATION DES DONNEES DE LA BATTERIE DU samaritan® Data-Pak™

Insérez la batterie du Data-Pak™ dans l'unité de récupération des données du samaritan et cliquez



sur le bouton 'Données du DEA'. Cela listera tous les événements enregistrés sur la batterie du Data-Pak.



Ecran des événements du DEA sur Saver™ EVO

Les événements précédés du symbole de l'horloge ⌚ sont les autotests réussis du DEA.



Tout enregistrer – En mode DEA, ce bouton est désactivé.



Afficher – Pour visualiser l'évènement sélectionné. Pour plus de détails, voir page 13.



Supprimer / Effacer – Bouton uniquement disponible si la batterie insérée dans l'unité de récupération des données du samaritan® est un Data-Pak+™ rechargeable. Dans le cas contraire, cette fonction est désactivée. Pour plus de détails, voir page 14.



Retour – Pour revenir à l'écran d'accès au DEA du logiciel Saver™ EVO.


AFFICHAGE DES EVENEMENTS DE DEFIBRILLATION ENREGISTRES SUR LE samaritan® DEA

Pour afficher un événement, sélectionnez l'évènement voulu parmi ceux de la liste et cliquez sur le



bouton 'Afficher'.

L'évènement de défibrillation avec tracé ECG et la liste des événements s'afficheront sur le même écran.

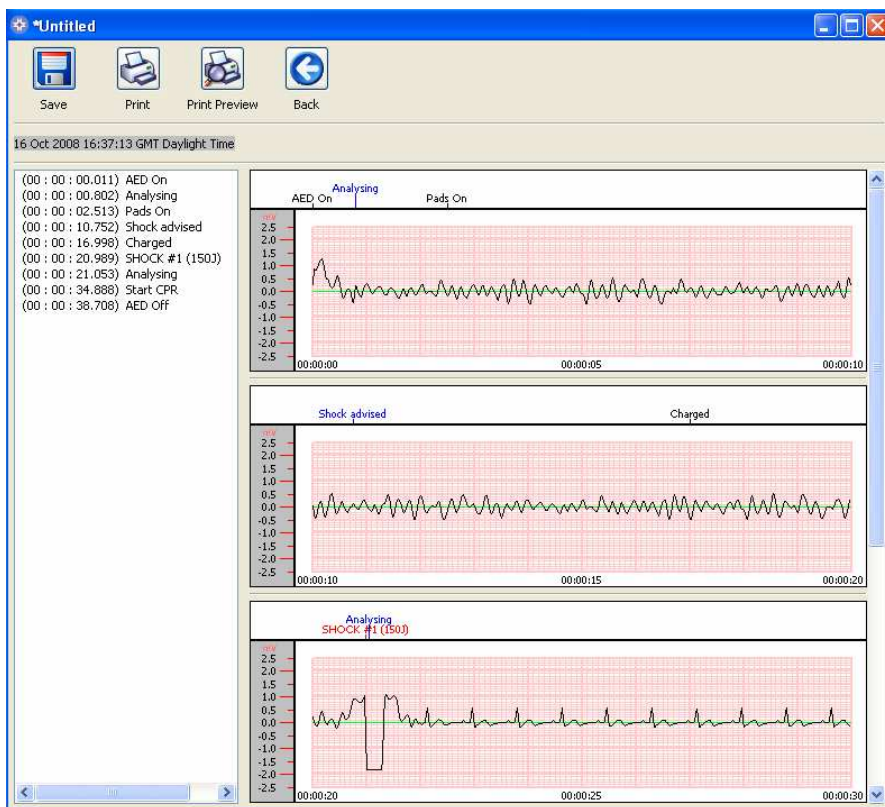

Ecran d'affichage
des évènements du
DEA sur Saver™
EVO

Vous pouvez maintenant choisir d'enregistrer l'évènement affiché sur votre PC en cliquant sur le



bouton 'Enregistrer'. A ce stade vous pourrez entrer des informations sur le patient pour pouvoir l'identifier sur la liste des évènements sauvegardés. Les informations relatives au patient peuvent être composées de caractères alpha numériques, et chaque champ peut être complété ou laissé vierge si nécessaire.

Ecran des informations patient du DEA
sur Saver™ EVO

N.B. Une fois les données de l'évènement de défibrillation enregistrées sur votre PC, elles ne pourront pas être modifiées.

L'écran d'affichage des évènements du logiciel Saver™ EVO contient également les boutons suivants :



Imprimer évènement – Pour imprimer l'évènement en cours de visualisation sur l'écran d'affichage.



Aperçu avant impression – Pour obtenir un aperçu des données à imprimer affichées à l'écran.



Retour – Pour revenir à l'écran des évènements du logiciel Saver™ EVO.

EFFACEMENT DE LA MEMOIRE DU Data-Pak™+



Pour effacer la mémoire du Data-Pak™+, cliquez sur le bouton 'Supprimer / Effacer'.

Par précaution, Saver™ EVO vous demandera votre mot de passe avant l'effacement de la mémoire. Une fois le mot de passe correct entré, la mémoire du Data-Pak™+ sera effacée.

Attention : HeartSine recommande de sauvegarder l'ensemble de la mémoire sur votre ordinateur avant de l'effacer. Ces informations devraient être stockées en toute sécurité pour référence future.

Il est recommandé d'effacer les évènements de la mémoire du PAD dont les données ont été récupérées depuis le samaritan® AED Data-Pak™+ et sauvegardées sur le PC. Cela permet de garantir que la mémoire soit entièrement disponible pour enregistrer les données d'un autre évènement de défibrillation.

MODIFICATION DES PARAMETRES DU DEA




Cliquez sur le bouton 'Modifier les paramètres du DEA' pour accéder à l'écran suivant :



Ecran de modification des paramètres du DEA sur Saver™ EVO



Vérifier / Régler l'heure du DEA – Pour synchroniser l'heure de la batterie du samaritan® AED à celle de votre PC.

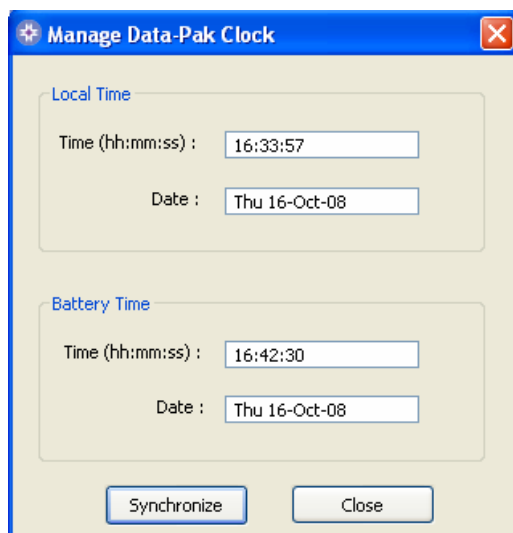


Ecran de vérification / réglage de l'heure du DEA sur Saver™ EVO

Cliquez sur le bouton 'Synchroniser' pour mettre le samaritan® AED à l'heure du PC auquel il est connecté.



Modifier la configuration du DEA – Pour modifier le volume, activer ou désactiver l'enregistrement audio, modifier la durée du rétro-éclairage, activer ou désactiver le lancement des autotests au démarrage, activer ou désactiver le son du métronome. Ces changements ne peuvent être confirmés que par la validation du mot de passe lorsqu'il est requis. L'écran ci-dessous illustre ces options. La charge de la batterie du Data-Pak est également affichée sur cet écran. En cas d'utilisation d'une batterie Data-Pak⁺, cet écran n'affichera pas la charge de batterie.

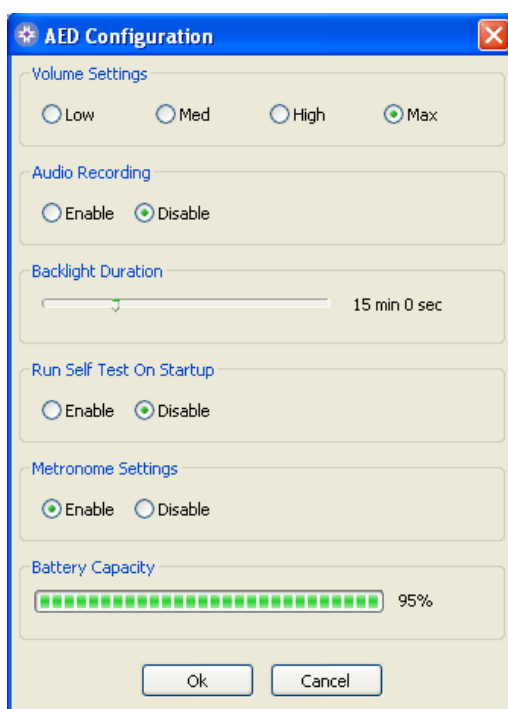

Ecran de modification de la configuration du DEA sur Saver™ EVO

UTILISATION DU LOGICIEL Saver™ EVO AVEC LE PDU

Pour utiliser le logiciel Saver™ EVO avec la carte-mémoire du samaritan® PDU, vous devez insérer la carte dans un lecteur de carte compatible SD/MMC connecté à ou intégré au PC exécutant le logiciel Saver™ EVO. Veuillez noter qu'il faut quelques secondes à une minute pour que le système d'exploitation de votre ordinateur reconnaisse qu'une carte se trouve dans le lecteur.



Cliquez sur le bouton 'PDU'. Le sous-menu ci-dessous s'affichera à l'écran :



Données du PDU - Pour récupérer les données de la carte-mémoire du PDU. Pour plus de détails, voir page 17.



Modifier les paramètres du PDU – Pour visualiser les paramètres de configuration du PDU. Pour plus de détails, voir page 19.



Retour - Pour revenir à l'écran de démarrage du logiciel Saver™ EVO.

RECUPERATION DES DONNEES DE LA CARTE-MEMOIRE DU PDU™

Assurez-vous que la carte-mémoire du PDU est bien insérée dans le lecteur de carte SD/MMC, puis



cliquez sur le bouton 'Données du PDU'. Cela permettra de lister tous les événements enregistrés sur la carte-mémoire.



Ecran des évènements du PDU sur Saver™ EVO

Les évènements précédés du symbole de l'horloge 🕒 sont les autotests réussis du PDU.

Les évènements indiqués en vert et précédés du symbole ✓ sont les évènements déjà enregistrés sur le PC.



Tout enregistrer – En mode PDU, ce bouton est désactivé.



Afficher – Pour visualiser l'évènement sélectionné. Pour plus de détails, voir page 18.



Supprimer / Effacer – En mode PDU, ce bouton est désactivé.




Retour – Pour revenir à l'écran d'accès au PDU du logiciel Saver™ EVO.

AFFICHAGE DES EVENEMENTS DE DEFIBRILLATION ENREGISTRES SUR LE PDU™

Pour afficher un évènement, sélectionnez l'évènement voulu parmi ceux de la liste et cliquez sur le

bouton 'Afficher' .

L'évènement de défibrillation avec tracé ECG et la liste des évènements s'afficheront sur le même écran.

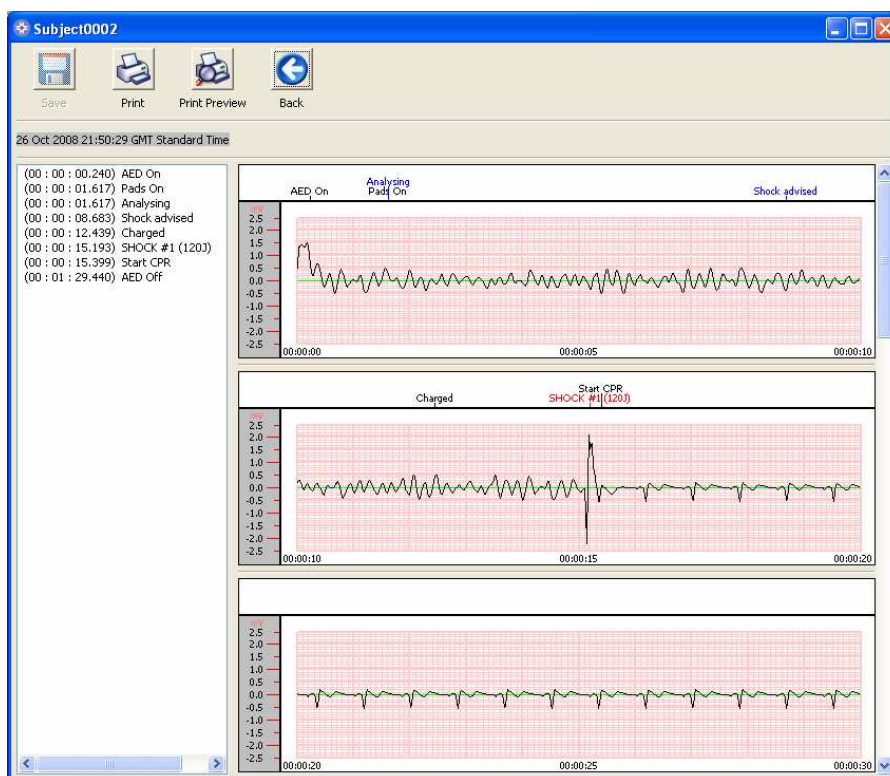

Ecran d'affichage
des événements du
PDU sur Saver™
EVO

Vous pouvez maintenant choisir d'enregistrer l'évènement affiché sur votre PC en cliquant sur le



bouton 'Enregistrer'. A ce stade vous pourrez entrer des informations sur le patient pour pouvoir l'identifier sur la liste des événements sauvegardés. Les informations relatives au patient peuvent être composées de caractères alpha numériques, et chaque champ peut être complété ou laissé vierge si nécessaire.

Ecran des informations patient du DEA
sur Saver™ EVO

L'écran d'affichage des événements du logiciel Saver™ EVO contient également les boutons suivants :



Imprimer évènement – Pour imprimer l'évènement en cours de visualisation sur l'écran d'affichage.



Aperçu avant impression – Pour obtenir un aperçu des données à imprimer affichées à l'écran.



Retour – Pour revenir à l'écran des événements du PDU du logiciel Saver™ EVO.

AFFICHAGE DES PARAMETRES DU PDU



Cliquez sur le bouton 'Afficher les paramètres' pour accéder à l'écran ci-dessous. A partir de cet écran, vous pouvez afficher la charge de la batterie, le volume des haut-parleurs, la langue, les paramètres du métronome, la séquence et la durée de RCP, la date d'expiration, la version du logiciel et le numéro de série du PDU. Ces paramètres peuvent être visualisés mais pas modifiés.



Ecran d'affichage des paramètres du PDU
sur Saver™ EVO

UTILISATION DU LOGICIEL Saver™ AVEC DES EVENEMENTS ENREGISTRES



Le bouton 'Gérer les événements enregistrés' de l'écran principal du logiciel Saver™ EVO permet de revoir les données qui ont été téléchargées à partir du samaritan® PAD, de la batterie du samaritan® Data-Pak ou de la carte-mémoire du PDU et sauvegardées sur l'ordinateur. Cliquez sur ce bouton pour accéder à l'écran ci-dessous :




Sélectionnez un événement parmi ceux de la liste et cliquez sur le bouton 'Afficher' pour ouvrir l'événement enregistré et visualiser le tracé ECG et le journal des événements.

Exportation et importation

Le logiciel Saver™ EVO dispose de fonctions permettant l'envoi et la réception de données de défibrillation provenant d'autres utilisateurs du logiciel Saver™ EVO. Pour envoyer ou recevoir des copies d'événements sauvegardés, utilisez les fonctions 'Exporter' et 'Importer' du logiciel Saver™ EVO.

Pour exporter des événements :

1. A partir de l'écran de gestion des événements enregistrés, sélectionnez l'événement ou les événements que vous souhaitez exporter, puis cliquez sur le bouton 'Exporter' .
2. Votre PC vous demandera de choisir où vous souhaitez enregistrer le fichier exporté et vous permettra également de le nommer.
3. Cliquez sur le bouton 'Enregistrer' pour sauvegarder le fichier à l'emplacement choisi.

Vous pourrez maintenant facilement joindre ce fichier à un e-mail via votre logiciel de messagerie habituel et envoyer le fichier exporté à un autre utilisateur du logiciel Saver™ EVO.

Les données d'évènements du logiciel Saver™ EVO ne peuvent être visualisées que par un autre utilisateur de ce logiciel. Les anciennes versions du logiciel Saver™ ne pourront pas importer et afficher les données provenant du logiciel Saver™ EVO correctement.

Pour importer des évènements :

Pour importer des évènements et les visualiser sur votre PC, vous devez sauvegarder le fichier qui vous a été envoyé par un autre utilisateur du logiciel Saver™ ou Saver™ EVO sur votre PC.

1. A partir de l'écran de gestion des évènements enregistrés, cliquez sur le bouton 'Importer'



2. Naviguez jusqu'à l'emplacement où vous avez sauvegardé le fichier et cliquez sur 'Ouvrir'.
3. Les enregistrements seront ajoutés à la liste des fichiers du logiciel Saver™ EVO enregistrés sur votre ordinateur.

Ces enregistrements peuvent être visualisés en sélectionnant l'évènement voulu parmi ceux de la liste et en appuyant sur 'Afficher'.

Le logiciel Saver™ EVO importera et affichera correctement les données d'évènements exportées de la version précédente du logiciel, appelée Saver™.

Pour supprimer des évènements enregistrés :

Les évènements enregistrés peuvent être supprimés de la mémoire de votre ordinateur via le logiciel Saver™ EVO. Les évènements peuvent être supprimés individuellement en sélectionnant tout simplement le ou les évènements à supprimer (sélections multiple autorisées).

Une fois que vous aurez confirmé que seuls les évènements sélectionnés sont à supprimer, cliquez



sur le bouton 'Supprimer / Effacer'. Par précaution, Saver™ EVO vous demandera votre mot de passe avant l'effacement de la mémoire. Une fois le mot de passe correct entré, les évènements sélectionnés seront supprimés de la mémoire.

Attention : HeartSine recommande de sauvegarder l'ensemble de la mémoire sur votre ordinateur avant de l'effacer, les données ne pouvant être récupérées une fois supprimées.


MODIFICATION DU MOT DE PASSE ET DE LA LANGUE DU LOGICIEL Saver™ EVO

Le logiciel Saver™ EVO dispose de fonctions ne pouvant être modifiées que par l'entrée d'un mot de passe. Cela permet aux administrateurs du logiciel de limiter l'accès à certaines fonctionnalités aux utilisateurs autorisés. Le logiciel Saver™ EVO est fourni avec comme mot de passe le mot « **password** » par défaut.

Pour modifier le mot de passe, veuillez suivre les étapes suivantes :



A partir de l'écran principal du logiciel Saver™ EVO, cliquez sur le bouton  pour accéder à l'écran ci-dessous :

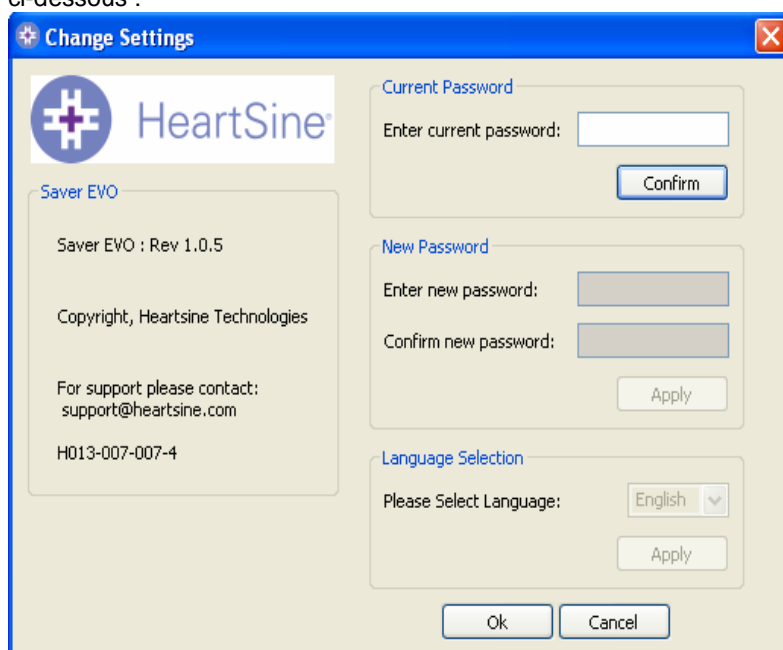


Indiquez l'ancien mot de passe et cliquez sur « Confirmer ». Vous pourrez ensuite entrer et confirmer un nouveau mot de passe.

Cliquez sur 'Appliquer' pour enregistrer la modification. Un message apparaîtra à l'écran pour confirmer que le mot de passe a bien été modifié. Cliquez sur 'OK' pour ce message, puis à nouveau sur 'OK' sur l'écran de modification du mot de passe pour quitter cette fonction.


Veuillez noter que la réinstallation du logiciel Saver™ EVO réinitialisera le mot de passe. Cette manipulation ne supprimera aucun des événements précédemment enregistrés.

Sélection de la langue

Pour modifier la langue du logiciel Saver™ EVO, sélectionnez la langue voulue parmi celles du menu déroulant et cliquez sur 'Appliquer'.

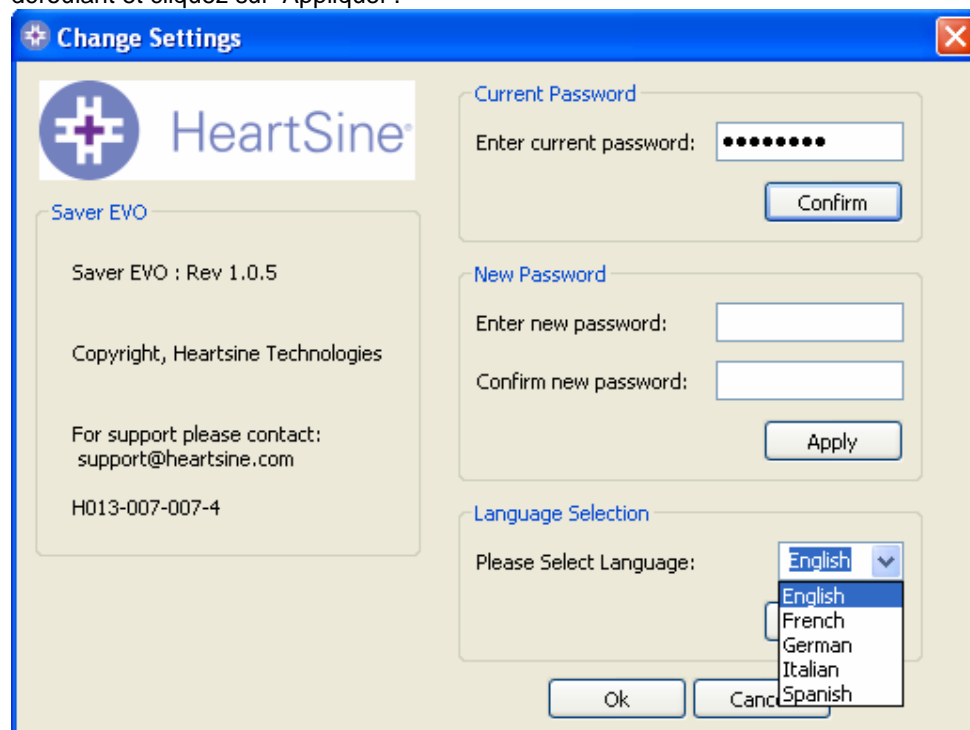

En cliquant sur 'Appliquer' l'écran suivant apparaîtra et vous devrez relancer le logiciel Saver™ EVO pour que la modification de la langue soit prise en compte.

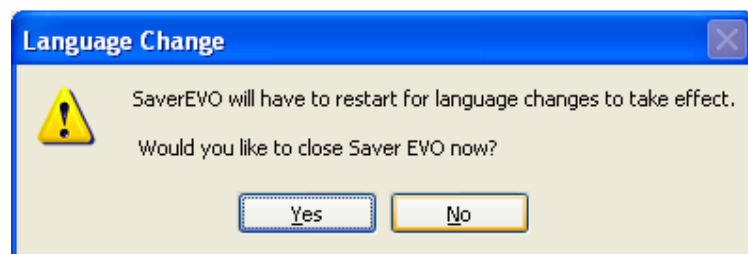

En cliquant sur 'Oui' pour ce message, si le mot de passe n'a pas été modifié, le message suivant apparaîtra à l'écran :



Cliquez sur 'Oui' ou 'Non' selon votre choix.

Remarque : Si le mot de passe a été modifié dans le cadre de la procédure de modification de la langue, le message ci-dessus n'apparaîtra pas à l'écran.

Le logiciel Saver™ EVO s'éteindra et la prochaine fois qu'il sera lancé la langue choisie sera automatiquement utilisée.